

SuperVario N

Mehrzweckzentrifuge für die Milchwirtschaft



Mehrzweckzentrifuge SuperVario N

Gerber-Zentrifuge für bis zu 36 Butyrometer sowie für die Fettbestimmung nach Babcock, Fettbestimmung nach Rose-Gottlieb* und Löslichkeitsbestimmung (ADPI)

**Betrieb nur entsprechend den geltenden Sicherheitsbestimmungen*

Die Zentrifuge zeichnet sich durch folgende Merkmale aus:

- **Bedienungskomfort:**
 - 5 wählbare Zentrifugierprogramme (Gerber, Röse-Gottlieb, Babcock, Löslichkeit und Free Mode)
 - Freie Einstellung (Free Mode) von
 1. **Drehzahl/g-Zahl** (einstellbar von 600 bis 1200 U/min, gleichzeitig wird die entsprechende g-Zahl angezeigt)
 2. **Temperatur** (einstellbar bis 68°C)
 3. **Zentrifugierzeit** (einstellbar von 1 bis 99 Minuten)
- **Schleuderkessel aus Edelstahl**
- **Sicherheits-Deckelverriegelung**
- **Automatische Unwuchsabschaltung**
- **Elektrische Bremse**

Technische Daten:


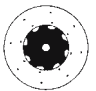

Anschluss: 230V/50...60 Hz/1200 VA
 Gewicht (leer): 26 kg
 Gesamthöhe mit Deckel: 460 mm
 Einfüllhöhe: 370 mm
 Drehzahlbereich: 600...1200 UpM
 Temperaturbereich: Umgebungstemp. bis 68°C



Bestelldaten:

Bezeichnung	Art.-Nr.
Zentrifuge SuperVario-N (ohne Schleuderaufsätze)	3680

Zubehör:

Bezeichnung	Art.-Nr.	
A 	Schleuderaufsatz A (bis zu 36 Butyrometer/bis zu 18 Babcockflaschen)	3685
	Butyrometer-Halter aus Leichtmetall-Druckguss	3631
	Babcockhalter	3632
B 	Schleuderaufsatz B (Schutzkessel für 8 Mojonnierrohre)	3686
C 	Schleuderaufsatz C (bis zu 6 Löslichkeitsgläser)	3687
	Halter für Löslichkeitsglas	3633