

QUANTOFIX® Nitrit 3000

de

Inhalt:

1 Aluminiumdose mit 100 Teststäbchen

Messbereich:

0,1–3 g/L NO_2^-

Farbabstufungen:

0 · 0,1 · 0,3 · 0,6 · 1 · 2 · 3 g/L NO_2^-

Allgemeine Hinweise:

Stets nur notwendige Anzahl Teststäbchen entnehmen. Dose nach Entnahme sofort wieder verschließen. Testfeld nicht berühren.

Gebrauchsanweisung:

1. Teststäbchen 1 s in Probe (pH 2–12) eintauchen.
2. Überschüssige Flüssigkeit abschütteln.
3. 60 s warten.
4. Testfeld mit Farbskala vergleichen. Sind Nitrit-Ionen vorhanden färbt sich das Testpapier orange-rot.

Störungen:

Stark saure Lösungen sollten mit verdünnter Natronlauge, stark alkalische Lösungen mit verdünnter Schwefelsäure auf etwa pH 4–6 eingestellt werden.

Folgende Ionen stören erst in größeren Konzentrationen:

> 1000 mg/L Ag^+ , Al^{3+} , Ba^{2+} , Be^{2+} , Ca^{2+} , Cd^{2+} , Co^{2+} , Cr^{3+} , Cu^{2+} , Hg^{+2} , K^+ , Mg^{2+} , Mn^{2+} , NH_4^+ , Na^+ , Ni^{2+} , Pb^{2+} , Sr^{2+} , Ti^+ , Zn^{2+} , Acetat, Citrat, Oxalat, Tartrat, EDTA, Br^- , CO_3^{2-} , Cl^- , ClO_3^- , ClO_4^- , NO_3^- , PO_4^{3-} , SO_3^{2-} , SO_4^{2-} , $\text{S}_2\text{O}_5^{2-}$, SeO_3^{2-} , > 500 mg/L Bi^{3+} , $\text{Fe}^{2+/3+}$, CN^- , CrO_4^{2-} , F^- , MnO_4^- , $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$, > 100 mg/L As^{3+} , Li^+ , Sn^{2+} , Ascorbat, S^{2-} , SCN^- , $\text{S}_2\text{O}_4^{2-}$.





Entsorgung:







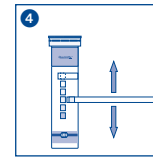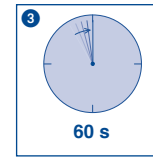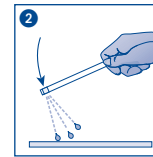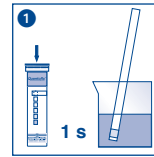


Benutzte Teststäbchen in den Hausmüll geben.

Lagerbedingungen:

Teststäbchen vor Sonnenlicht und Feuchtigkeit schützen. Dose kühl und trocken aufbewahren (Lagertemperatur nicht über +30 °C).

Bei sachgemäßer Lagerung sind die Teststäbchen bis zum aufgedruckten Verfallsdatum haltbar.



 Haltbarkeitsdatum / Use by / A utiliser jusqu'à / Fecha de vencimiento / Houdbaarheidsdatum / Data di scadenza / Data ważności	 LOT Chargenbezeichnung / Lot number / Numéro de lot / Número de lote / Lotnummer / No del lotto / Oznaczenie szarży
 REF Artikelnummer / Catalog number / Référence / Art. nro. / Referentienummer / Codice articolo / Numer artykułu	 Packungsinhalt / Package content / Contenu de la boîte / Contenido del envase / Verpakkingsinhoud / Contenuto della confezione / Zawartość opakowania
 ! Packung geschlossen halten / Keep container closed / Refermer la boîte / Mantenga el envase cerrado / Verpakking gesloten houden / Conservare la confezione chiusa / Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty	 Vor Feuchtigkeit schützen / Protect from humidity / Protéger de l'humidité / Protéjase de la humedad / Beschermen tegen vocht / Proteggere dall'umidità / Chronić przed wilgocią
 Lagertemperatur / Storage temperature / Température de stockage / Temperatura de almacenaje / Bewaartemperatuur / Temperatura di magazzino / Temperatura przechowywania	 Packungsbeilage lesen / Please read instructions / Lire les instructions, svp / Obsérvense las instrucciones de uso / Lees de bijsluiter / Leggere il foglio informativo / Należy przeczytać ulotkę informacyjną
 Sicherheitshinweise in der Packungsbeilage beachten / Observe the safety precautions in instructions / Respecter les précautions de sécurité des instructions / Obsérvense las indicaciones de seguridad / Neem de veiligheidsrichtlijnen in de bijsluiter in acht / Seguire le avvertenze di sicurezza / Należy przestrzegać uwag zawartych w ulotce informacyjnej	

MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG · Neumann-Neander-Str. 6–8 · 52355 Düren · Deutschland
Tel.: +49 24 21 969-0 · Fax: +49 24 21 969-199 · info@mn-net.com · www.mn-net.com

Schweiz: MACHEREY-NAGEL AG · Hirsackerstr. 7 · 4702 Oensingen · Schweiz
Tel.: 062 388 55 00 · Fax: 062 388 55 05 · sales-ch@mn-net.com